




Bosch HTS 61

# Installatiehandleiding persoonsalarm





# Installatiehandleiding persoonsalarm

Geachte heer/mevrouw,

Fijn dat u nu persoonsalarmering heeft. Hieronder leggen wij u uit hoe u het apparaat kunt installeren. Leest u deze installatiehandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens tot installatie over te gaan. Deze handleiding zal u stap voor stap de informatie geven die nodig is.


**Wij adviseren om het apparaat tijdens kantooruren aan te sluiten.** Mocht u er onverhoopt niet uit komen, helpen wij u graag verder. Hiervoor belt u naar CSI op 088 027 40 00. Zie onze website voor de huidige openingstijden.

[csipersoonsalarmering.nl](http://csipersoonsalarmering.nl)

## Stap 1

Voordat u begint met installeren, controleer of het pakket de volgende onderdelen bevat:

- 1 Alarmapparaat
- 2 Hand- en halszender met koord en een polsband/ring
- 3 Voedingsadapter
- 4 Telefoonsnoer
- 5 Splitter


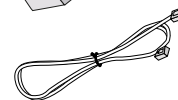


# Installatie

Het persoonsalarm is reeds geprogrammeerd en hiermee klaar voor gebruik. Installeer het persoonsalarm in de buurt van een stopcontact en uw huidige telefoon.



## Stap 2

Sluit de stekker van de meegeleverde voedingsadapter op de bijbehorende aansluiting van het persoonsalarmtoestel aan (deze aansluiting is rood gemarkeerd). Leid de kabel door het kabelkanaal en vervolgens door de opening aan de achterzijde van het toestel. **Stop de adapter nog niet in het stopcontact.**

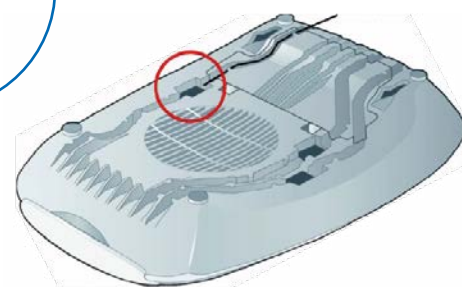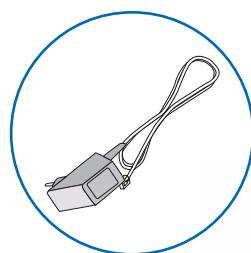



## Stap 3

Plaats de connector van de splitter in de bijbehorende aansluiting op het persoonsalarm. Leid de kabel door het kabelkanaal en vervolgens door de opening aan de achterzijde van het toestel.

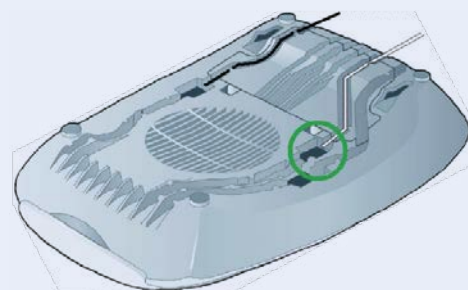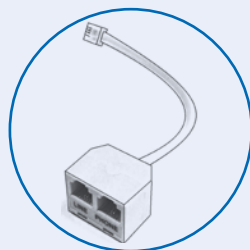

## Stap 4



Haal nu het telefoonsnoer uit uw eigen telefoontoestel of basisstation van uw decttoestel. Deze zit aan de onder- of achterzijde van uw telefoontoestel of basisstation van uw decttoestel (basisstation heeft zowel een voedingsadapter als een telefoonaansluiting). Dit kan door het lipje van de doorzichtige connector in te drukken (zie afbeelding) en gelijktijdig de connector uit het toestel te trekken.

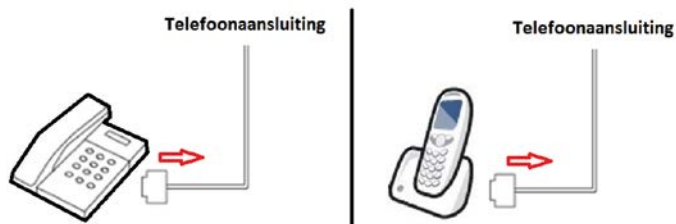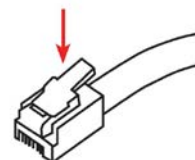





## Stap 5

Plaats nu het los gehaalde telefoonsnoer in de "LINE" aansluiting van de splitter.

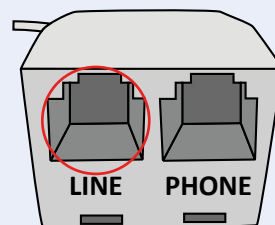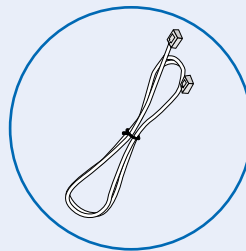

## Stap 6

Plaats de connector van het bijgeleverde telefoonsnoer in de "Phone" aansluiting van de splitter.

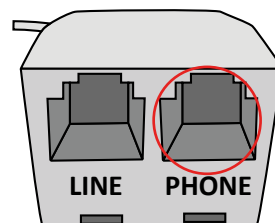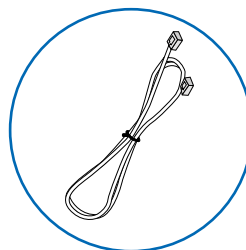


## Stap 7

Stop nu de andere zijde van het telefoonsnoer in de telefoonaansluiting van uw telefoon-toestel (dit is de aansluiting die u in "STAP 3" heeft losgehaald).

De nieuwe situatie

Telefoonaansluiting

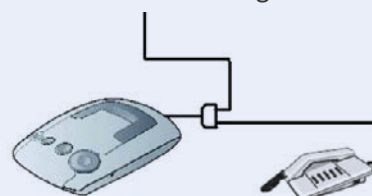


## Stap 8

Sluit nu de voedingsadapter op het stopcontact aan. Alle indicatielampjes branden ongeveer 2 seconden. Als het blauwe lichtje een aantal minuten continu brandt is het apparaat klaar voor gebruik. Dit kan tot 20 minuten duren.

Wanneer het blauwe lichtje uit is, is het apparaat een aantal testen aan het uitvoeren. Uw telefoon kan dan tijdelijk niet werken. Wacht dan 20 minuten tot het blauwe lichtje continu brandt.

Test nu of uw eigen telefoontoestel nog functioneert. Laat ook iemand naar u toe bellen om te controleren of dit ook goed werkt.

Knippert het blauwe lichtje, druk dan 1x op de blauw/grijze knop. Het apparaat vertelt wat de storing is. Wanneer het apparaat een storing meldt, controleer dan of u de voorgaande stappen goed heeft uitgevoerd.

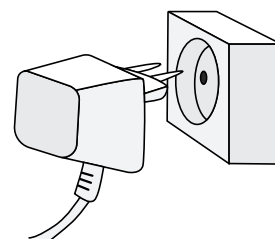


## Stap 9

Lees nu de bijgeleverde informatiekaart door.



## Stap 10

Maak met uw zender een testmelding:  
Druk op de knop van uw zender. Het duurt minimaal 30 seconden voordat de verbinding tot stand kan komen. Afhankelijk van de drukte bij de meldcentrale kan dit langer duren.

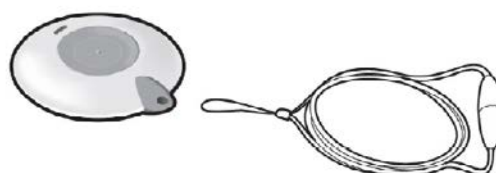

## Stap 11

Zodra u verbinding heeft met een medewerker van de meldcentrale, geeft u aan dat het om een testalarm gaat en dat u samen met de centralist uw gegevens wilt controleren.

Mocht de meldcentrale uw gegevens niet kennen, neem dan contact op met de Customer Care Center.

Indien er een storing aan uw persoonsalarm mocht optreden belt u dan direct met de Customer Care Center.

**Het apparaat is goed aangesloten. Vanaf nu bent u veilig. CSI, een veilig gevoel.**

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Kijk dan op [csipersoonsalarmering.nl](http://csipersoonsalarmering.nl) of bel ons 088 027 40 00. U kunt mailen naar [service@csiservice.nl](mailto:service@csiservice.nl). Wij helpen u graag verder.

**CSI Persoonsalarmering**  
Biesven 2  
5595 DD Leende  
T: 088 027 40 00  
E: [service@csiservice.nl](mailto:service@csiservice.nl)  
W: [csipersoonsalarmering.nl](http://csipersoonsalarmering.nl)